


NomoLine[®]

Líneas de muestreo

Juegos de adaptadores para vías respiratorias y cánulas para todos los pacientes en condiciones de baja y alta humedad




Líneas de muestreo para uso a corto y largo plazo con tecnología que elimina la humedad y ofrece capnografía y mediciones de monitorización de gases precisas.

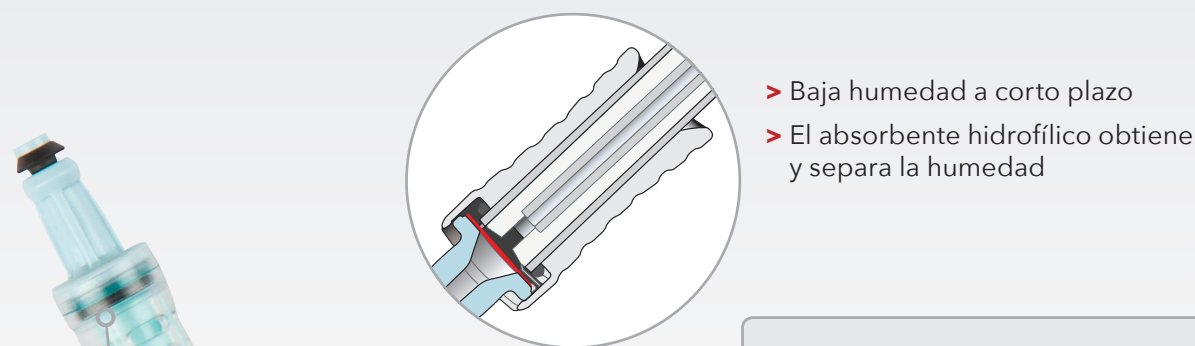


- > Baja humedad a corto plazo
- > El absorbente hidrofílico obtiene y separa la humedad

Sección sin humedad que elimina la necesidad de un colector de agua

- > La muestra sin humedad ofrece mediciones precisas para ayudar a los médicos a tomar decisiones más informadas

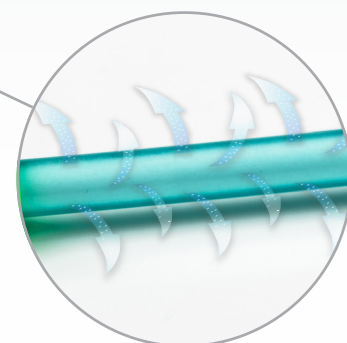

- > Alta humedad a largo plazo
- > El polímero sin humedad patentado permite que la humedad se disemine en el entorno

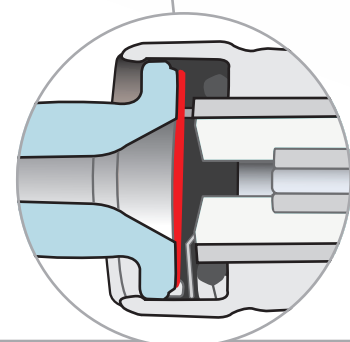

Filtro de bacterias hidrofóbico que reduce la contaminación del analizador ISA™

- > Extiende la vida del módulo al reducir la penetración de agua
- > Garantiza la seguridad al reducir el riesgo de contaminación bacteriana



Cánulas diseñadas de forma ergonómica que mejoran la comodidad del paciente


- > Las cánulas ligeras y suaves con un diseño curvado se ajustan a los contornos de la cara para minimizar la presión
- > Varias opciones que permiten el uso con todos los pacientes

Línea de muestreo con un diseño único que permite su uso en aplicaciones de bajo flujo y muestras pequeñas

- > Solo requiere una pequeña muestra de respiración, 50 ml/min
- > Los juegos de adaptadores para vías respiratorias permiten un tiempo de subida más rápido y una forma de onda no afectada



- > Los tubos de lumen estrellado para el abastecimiento de oxígeno garantizan el suministro aunque estén curvados

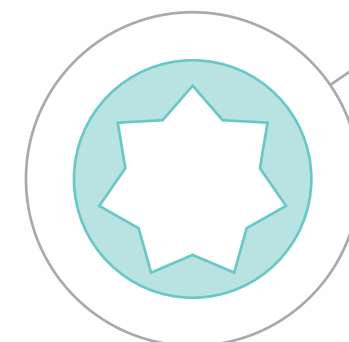


Dispositivos compatibles



> Tiempo de inicio rápido

Tiempo de preparación prácticamente instantáneo y rendimiento con una precisión total en diez segundos, sin requisitos de calibración¹.

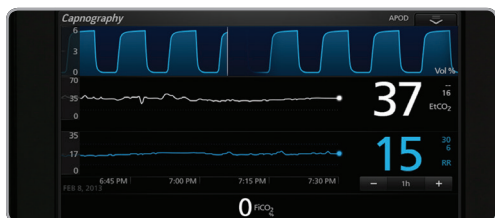

Pantalla de forma de onda

La forma de la onda del EtCO₂ en tiempo real proporciona una pantalla fácil de interpretar con las mediciones por capnografía.



Entrada de gas emisora de luz (LEGI en inglés)

El indicador se ilumina en varios colores para proporcionar indicadores visuales sobre el estado del módulo de capnografía y el conector simple ofrece una conexión sin fugas al dispositivo.

Especificaciones de la línea de muestreo NomoLine

Opciones de longitud	2 m y 3 m
Frecuencia de flujo de muestreo	50±10 ml/min
Filtro de bacterias instalado	BFE ≥ 99,9%
Diámetro interno del tubo	1 mm
Abastecimiento suplementario de oxígeno	Hasta 5 lpm
Espacio muerto del adaptador para vías respiratorias	
Pacientes adultos/pediátricos	≤ 6 ml
Lactantes y lactantes/neonatal	≤ 0,7 ml
Material	Fabricado sin látex de caucho natural

¹ Consulte el manual del operador del dispositivo.

Rad-97™ con capnografía NomoLine no cuenta con licencia para su venta en Canadá.

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener la información completa de prescripción, que incluye indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Masimo U.S.
Tel: 1 877 4 Masimo
info-america@masimo.com

Masimo International
Tel: +41 32 720 1111
info-international@masimo.com

